

Kit di Emergenza gas medicali



Contains:
Medical Devices
IIb Class
CE 0425



Scheda tecnica

Il kit di emergenza gas medicali nasce dalla necessità di fornire alle strutture ospedaliere un kit pronto all'uso per coprire le emergenze sanitarie.

Può capitare infatti di avere la necessità di alimentare un reparto in caso di guasto di uno dei riduttori di rete presenti, o anche di dover movimentare un paziente avendo la necessità di connettere una piccola bombola per ossigenoterapia o areosolterapia.



Il kit, fornibile sia con comoda ed antiurto valigetta portatile (impermeabili, a prova di polvere, resistenti alle sostanze chimiche in conformità con IP67), o con carpenteria da alloggiare nelle aree critiche (verniciata con vernice antibatterica Kill Sept ed apertura Easyentry), presenta al suo interno dei riduttori da bombola compatti con attacco a mano, con singolo manometro per una facile ed immediata lettura del gas presente in bombola. A corredo una frusta bassa pressione gas medicali, dispositivo medico clampato con innesto a norma Afnor o Uni, di lunghezza 1.5 metri gas specifica, che può facilmente essere utilizzato per connettere i riduttori all'impianto gas, ai ventilatori polmonari, o ad ogni qualsivoglia dispositivo che necessiti aria FU ed Ossigeno FU per il suo funzionamento.

Un semplice QR Code presente all'esterno da immediata indicazione dei dispositivi contenuti all'interno e dei codici Medical Devices presenti.

Valigette portatili

V-KEM-O2AC-U

Kit emergenza STORM gas medicali per Ossigeno ed Aria FU, NR in valigia protector portatile antiurto, inclusa di un riduttore bombola ad un manometro ed uscita presa Afnor per ossigeno, un riduttore ad un manometro ad uscita ed uscita presa Afnor per Aria, una frusta da 1.5 metri preclampata con innesto Afnor-UNI per Ossigeno (IA-IU), una frusta da 1.5 metri preclampata con innesto Afnor-UNI per Aria (IA-IU). RIDT25B+RIDT40B+TUB01015IA-IU+TUB0301SIAIU

V-KEM-02-U

Kit di emergenza STORM gas medicali per Ossigeno, in valigia protector portatile antiurto, inclusa di un riduttore bombola ad un manometro ed uscita presa Afnor per ossigeno, una frusta da 1.5 metri preclampata con innesto Afnor-UNI per Ossigeno (IA-IU). RIDT25B+TUB01015IAIU

V-KEM-02AC-A

Kit emergenza STORM gas medicali per Ossigeno ed Aria FU, NR in valigia protector portatile antiurto, inclusa di un riduttore bombola ad un manometro ed uscita presa Afnor per ossigeno, un riduttore ad un manometro ad uscita ed uscita presa Afnor per Aria, una frusta da 1.5 metri preclampata con innesto Afnor-Afnor per Ossigeno (IA-IA), una frusta da 1.5 metri preclampata con innesto Afnor-Afnor per Aria (IA-IA). RIDT25B+RIDT40B+TUB0301SIAIA-TA+TUB0101SIAIA

V-KEM-02-A


Kit di emergenza STORM gas medicali per Ossigeno, in valigia protector portatile antiurto, inclusa di un riduttore bombola ad un manometro ed uscita presa Afor per ossigeno, una frusta da 1.5 metri preclampata con innesto Afnor-Afnor per Ossigeno (IA-IA). RIDI25B+TUB01015IIA

Disponibile anche la versione con cassetta da esterno

Dati tecnici

Peso e dimensioni

- esterno: 41,1 × 32,3 × 16,8 cm
- 5 KG

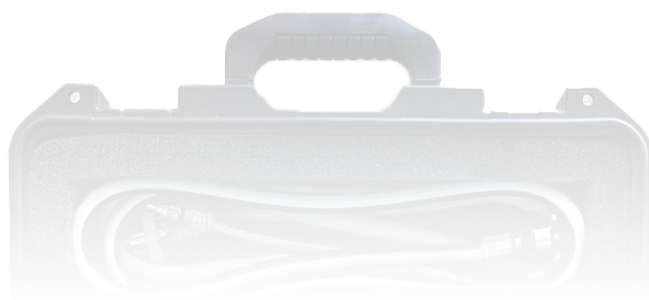



Contatti

DZ Medicale s.r.l

(+39)0307268254

www.dzmedicalesrl.com

info@dzmedicalesrl.com

Via Lega Lombarda 8, 25036,
Palazzolo sull'Oglio (BS) Italia